

MANUAL DE USUARIO

Balanzas Industriales Serie BS



Usted a comprado una Balanza Industrial de Precisión que requiere un tratamiento cuidadoso.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la Balanza.

Calibre la Balanza utilizando pesas de referencia con una tolerancia apropiada con la clase del instrumento.

Las pesas tienen que ser mas precisas que la sensibilidad de la Balanza para poderlas utilizar y no introducir un error superior a la precisión de la Balanza.

Para mas información sobre la selección de las pesas de referencia, por favor pongase en contacto con el Servicio Técnico de COBOS PRECISION, S.L.

Precaución: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por COBOS PRECISION, S.L., podrían influir en el correcto funcionamiento de la Balanza.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir una de nuestras balanzas. Nuestras balanzas están diseñadas y fabricadas con los mas rigurosos estándares de calidad y por nuestra larga experiencia.

Primero, verifique el contenido del embalaje. Usted debería encontrar el siguiente material:

- * **Manual**
- * **Balanza**
- * **Adaptador de Red**


Una vez verificado, siga las instrucciones para instalar nuestra balanza.

Ahora usted esta listo para utilizar la Balanza. Para utilizar las funciones de la balanza, lea cuidadosamente el manual de instrucciones.

Este manual contiene paso a paso los procedimientos, ejemplos y otras informaciones vitales.

Peligro: La utilización de esta Balanza, sin seguir las instrucciones del fabricante, podría provocar daños graves o un mal funcionamiento en la Balanza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

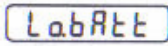MODELO	BS-30	BS-60	BS-150
RANGO	30Kg	60 Kg	150 Kg
REPETIBILIDAD	10g/ 5g	20g / 10g	50g / 20g
TAMAÑO DEL PLATO	320 X 430 mm (Ancho X Largo)		
DISPLAY	LCD, Tamaño 25 mm		
TEMPERATURA DE TRABAJO	0°C ~ 40°C 85 RH		
ALIMENTACIÓN	9V / 500 mA, Adaptador de red incluido Batería recargable interna  Cuando aparezca este mensaje en el Display, debe ponerse a cargar la Balanza		

PREPARACIÓN

Este producto esta diseñado para el uso en recintos cerrados.


- Seleccione la zona de trabajo.
- Trabaje en un área que este libre de corrientes de aire y vibraciones.
- No coloque cerca materiales magnéticos o instrumentos/equipos que contengan los contengan en su interior.
- Evite las áreas de la habitación con variaciones de temperatura o temperaturas excesivas. La temperatura de funcionamiento de la balanza debe estar entre 0°C y 40°C.

INSTALACIÓN

Retire la Balanza y los accesorios del embalaje.

Guarde el embalaje por si tiene que transportar la Balanza.

- Si utiliza el adaptador de Red, inserte el conector en la balanza
- Antes de utilizar la balanza, manténgala conectada durante 30 minutos.
- La Balanza contiene un display numérico que continuamente muestra el resultado del peso.

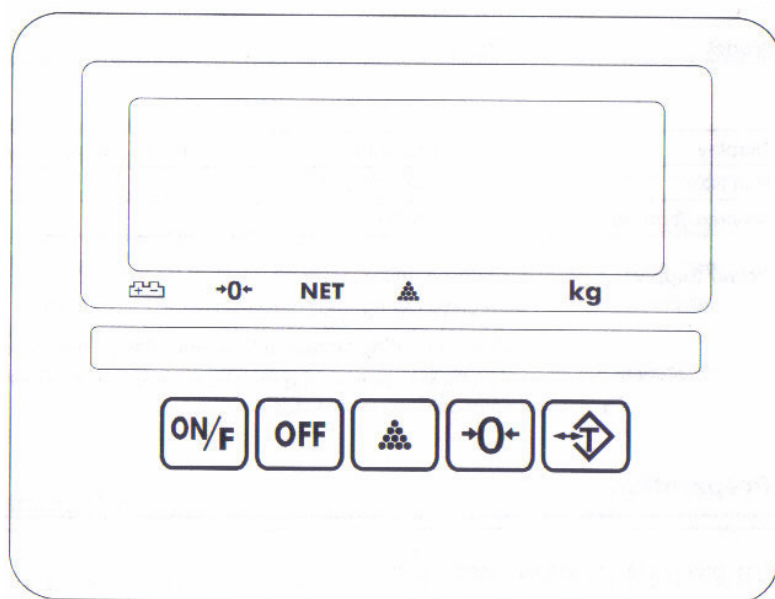

FUNCIÓN DEL TECLADO



A) Enciende la Balanza **(ON)**.

B) Tecla de Funciones. Mantenido pulsada conmuta entre peso, cuentapiezas o acumulación.



Apaga la Balanza **(OFF)**.



Usado para seleccionar la cantidad de piezas.



Se utiliza para coger una nueva lectura de cero.




Sirve para conmutar entre las unidades Kg / lb.





FUNCIONES

1. Tara.


En todos los modelos se puede realizar la tara de toda la capacidad de la Balanza. Para realizar la pesada de una muestra depositada en un contenedor realice el siguiente procedimiento:


- a) Coloque el contenedor encima del plato de la Balanza y entonces aprete la Tecla  , aparecerá **NET** iluminado en el Display.
- b) Coloque la muestra dentro del recipiente.
- c) Cuando la balanza se estabiliza, el display muestra el valor de peso de la muestra.


E. Función Cuentapiezas.

- a) Decida entre las diferentes cantidades de piezas de muestra para poner encima del plato de la Balanza (10, 20, 50 o 100 piezas).
- b) Apriete la Tecla  el display indicará las cantidades de numero de piezas.
Cuando el numero del ciclo, coincida con las piezas colocadas de muestra, apriete la Tecla  una vez. En la parte inferior del display podrá ver el símbolo de las piezas  .
- c) Ahora usted esta listo para contar esas piezas específicamente.
Apriete la Tecla  para que el display indique el peso total de las piezas.
Cuando vaya a contar otras piezas repita los pasos de **a)** hasta **c)**, para cada tipo de piezas.

MENU

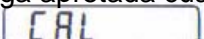Apriete y mantenga apretada cualquier tecla mientras conecte la Balanza **ON**. El display indicará .

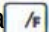Apriete la Tecla .

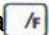Apriete la Tecla  para seleccionar el parámetro.

Apriete la Tecla  para seleccionar y pasa a mostrar el siguiente nivel.

La secuencia de las funciones es la siguiente:

A. Autocero

AO 0

AO 1

AO 2

Desactivado

ATZ 1

ATZ 2

B. Desconexión

AOFF 0

AOFF 1

AOFF 2

AOFF 3

AOFF 4

Desactivado

Después de 5 minutos

Después de 10 minutos

Después de 20 minutos

Después de 30 minutos

C. Retroiluminación

bL 0

bL 1

bL 2

Desactivado

Activado

Cuando se coloque peso


CALIBRACIÓN


1.- Apriete y mantenga pulsada cualquier tecla mientras conecta la balanza.

(Interruptor **ON**). El sistema entra en **modo de Calibración**.

2.- Apriete la Tecla  entraremos en el modo de Capacidad.



3.- Apriete la Tecla  para seleccionar la capacidad máxima.

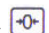
4.- Apriete la Tecla  para entrar en el modo SPAN,
(el display debe mostrar un valor entre 5000 ~ 50000)

5.- Apriete la Tecla  para que el display muestre cero.


6.- Ponga las pesas de calibración encima del plato.


(El display debe mostrar 50000 ~ 150000 cuentas a máxima capacidad).


7.- Apriete la Tecla  cuando coincida la pesa con una de las pesas de calibración mostradas, cuando el display nos muestre el peso, apriete la Tecla .

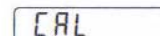



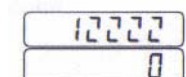

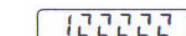

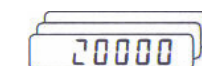

MENSAJES DE ERROR

SÍNTOMA

CAUSA


SOLUCIÓN



Sobrecarga:

*Excedida la Capacidad .
máxima

Descarge la Balanza o reduzca el
tamaño de la muestra

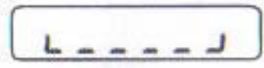

Falta de Peso:

*El plato no esta colocado


Verifique que el plato este bien
Colocado y que no toque con la
carcasa o funda blister.

*El rango de cero es bajo

Pulse la tecla Cero.

*Tarado entre pesos

Vuelva a tarar o pulse Cero

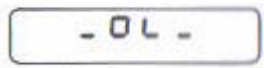

Imposible mostrar Cero:

El cero se ha salido fuera
de rango

Asegurese que el cero se
encuentra dentro del 20%
de la capacidad de la balanza.